

Delsys筋電計備忘録


—わからないことは積極的にお問合せを—

2022/4/6 Trigger ModuleのBox側端子が外れてしまった場合を追記。

旧センサ・新センサ（Avanti） 共通


実験実施中の操作

- ・ Ctrl+A がスタートのショートカットキー
- ・ グラフ拡大縮小 グラフを左クリックしてから…
縦軸：F5 F6で拡大縮小
横軸：F7 F8で拡大縮小（計測中はこっちが使いやすい）
- ・ 縦軸一斉変更
左上Global Options Link Y Zooming ON にすると、上記ショートカットで全グラフ一気に変わる。
- ・ **実験中、グラフの表示は振り切れているのに、保存した方にはちゃんとデータがある。**
 - ・ グラフ表示の拡大縮小を何回か試す『F5 F6を繰り返し押し押してみる』
 - ・ Avantiセンサの場合、加速度計orジャイロの値を確認する → 全て0の時：通信・測定・記録全てできていない。
値がある場合：リアルタイム通信ができていないだけ。

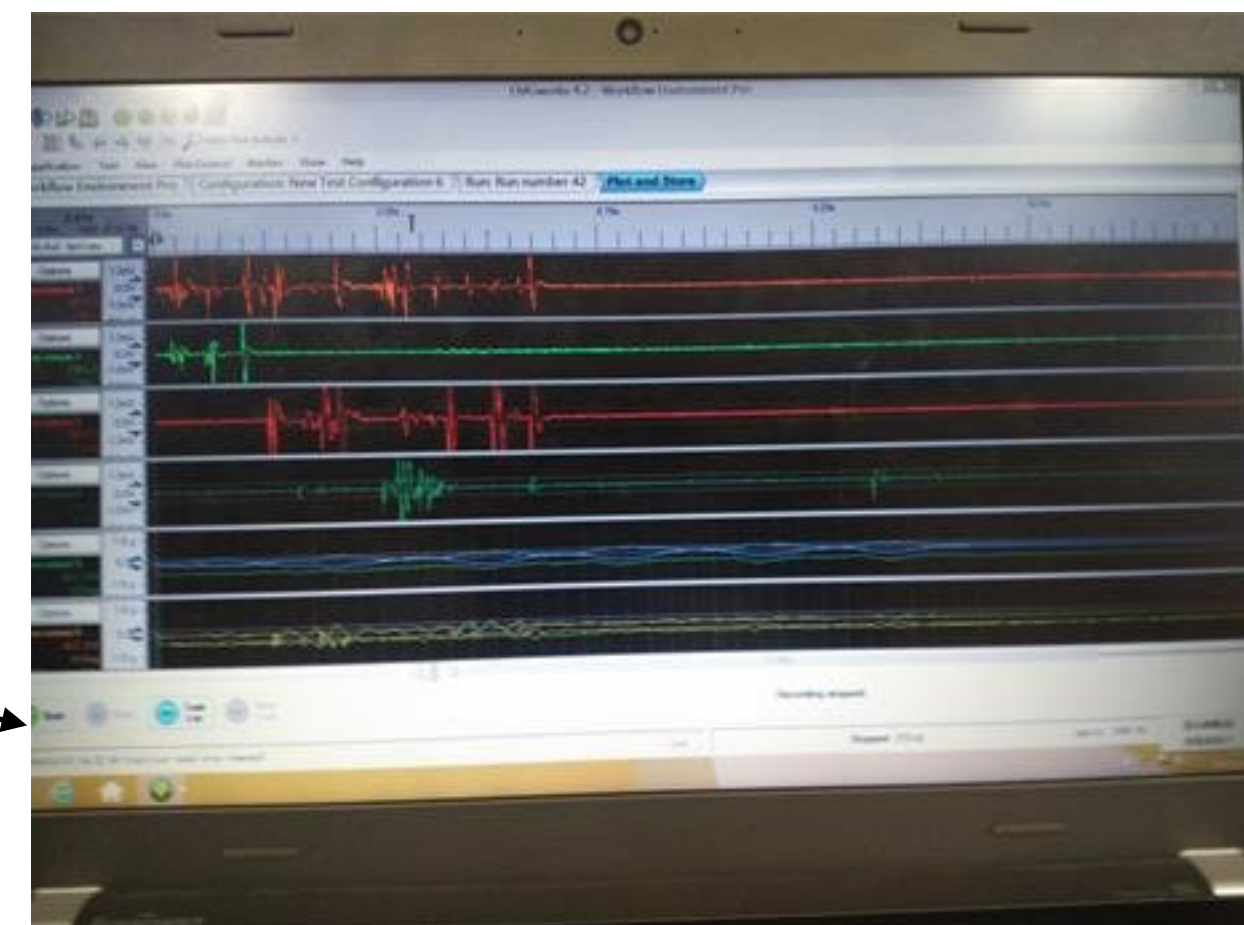

旧センサ・新センサ（Avanti） 共通 EMGworks Acquisition を使っている時

- ・ 計測するときは、Plot and Storeを使えば大抵のことはできる。
- ・ Plot Columes の数を上げると見やすい。
- ・ Nameに日付 or 被験者IDを入れることにしておけば、保存ファイル名に残るので、便利。
- ・ **ペアリングし直した時にEMGworks Acquisitionが起動しなくなったら…**
 - ・ Delsys Software Update Tool（地球儀のアプリ）を起動（要ネット）して、中段のベースステーションのチェック項目で、左側に Reset Base Flash Memoryという項目をクリック
 - ・ 下記ディレクトリにある“TrignoSettings0.xml”というファイルを、一度他の場所へ退避。
C:\Users\ログイン名\AppData\Roaming\Delsys, Inc\EMGworks(AppDataフォルダは隠しフォルダになります。)

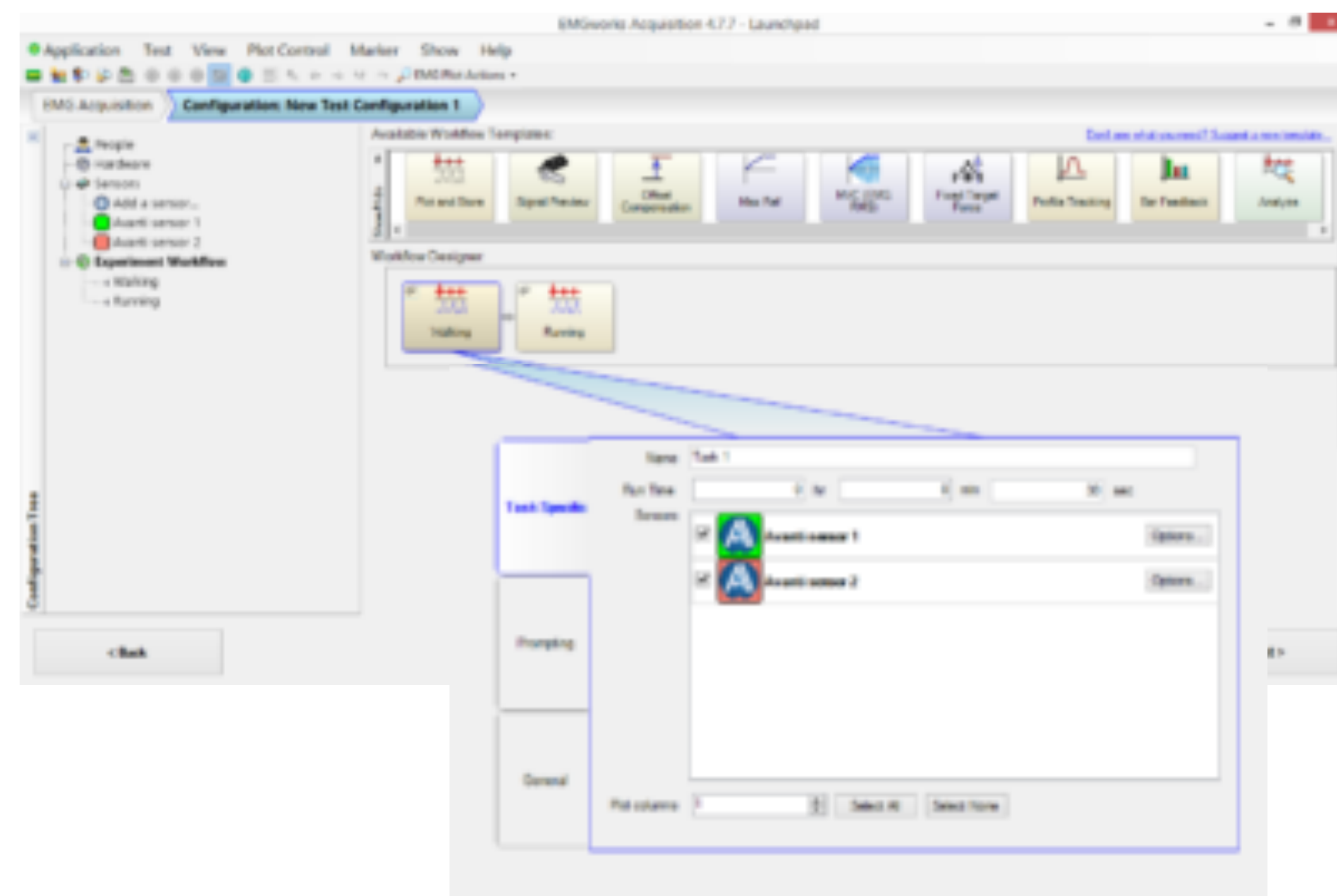

Avanti系センサとの混在にあたって Pairingする時の注意。

- Quattroセンサが登録できるのは、1、2、3、4のどれかのみ。
- 1に登録すると、5、9、13が自動登録される。つまり、他のセンサは登録できない。
(2に登録すると、6、10、14。3に登録すると、7、11、15)
- Duoセンサが登録できるのは、奇数のどれかのみ。
(1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16がペアで自動登録。



Avanti系センサの設定注意

一部旧センサも共通

- ・被験者にセンサを貼付してからのセンサONはできない。（スピード重要）
- ・筋電センサの充電は新品で6時間（Quatoro：4時間）電池交換は不可。
- ・フル充電にかかる時間は約2時間（電池が悪くなります。使わない時は充電しないこと！！）
- ・開発の事情で各センサだけでのダウンサンプリング設定は苦手です。（暴走の可能性あります）
- ・デフォルトのサンプリング周波数
(旧センサ：1926Hz、Quattro：2222Hz、IMU付：1259Hz)
- ・Hardwareから Resample EMG to のチェックボックスにチェック（サンプリングレートが2000Hzになる。）
その後、必ず各センサのサンプリングレートも2000Hz以下に設定する。
例：Quattroの場合、EMG+IMUにすれば2000Hzになる。
- ・ただし、1ch 2500HzとしてEMGとIMUのサンプリングレートを分ける必要がある。
例：Quattro：EMG2000Hz×4+148Hz×6、Duo：EMG2000Hz×2+166Hz×6、EMG2000Hz+83Hz×6



Trigger Module のBox側端子が分離した！

注意：普段から、Boxとの接続の際には、赤い・の位置をよく確認し、真っ直ぐにBoxに差し込みましょう



- ①部品が揃っていることを確認
- ②向きを確認して留め具をケーブルに入れる
- ③2つの金色パーツ内側の溝から、向きをチェック
- ④金色パーツの出っ張りを王冠型の金具の凹みに、金色パーツの穴をプラスチックパーツの出っ張りとおわせる
- ⑤裏側にもう1つの金属パーツを合わせる（溝の向き注意）
- ⑥・の位置（内側にくぼみがある位置と金属パーツの出っ張りの位置を合わせて差し込む（カチッとハマる）
- ⑦留め具をしっかりしめる

